

Información para pedidos

Código del producto	Descripción	Cantidad
M0063905000	Dakota 1,9F x 8mm x 120cm	Single Unit
M0063905010	Dakota 1,9F x 11 mm x 120cm	Single Unit

Cada detalle de esta innovadora cesta híbrida se ha concebido para acercarle un paso más al verdadero objetivo—**incrementar el número de pacientes libres de cálculos y mejorar los resultados.**

**NO SE NOS RESISTE
NI UN SOLO CÁLCULO.**


Para obtener más información para pedidos, póngase en contacto con su representante de ventas.

Para obtener información más detallada, visite:
www.bostonscientific.com/en-EU/medical-specialties/urology.html

*Los resultados de las pruebas comparativas no son necesariamente indicativos de los resultados clínicos. Datos de archivo.

Todas las marcas comerciales indicadas pertenecen a sus propietarios correspondientes. PRECAUCIÓN: las leyes limitan la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción médica. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso pueden consultarse en el etiquetado del producto que se suministra con cada dispositivo. Información disponible únicamente para los países con los correspondientes registros de productos por parte de las autoridades sanitarias. Este material no está aprobado para su uso o distribución en Francia.

URO-413211-AB JUN 2016 Impreso en Alemania por medicalvision.

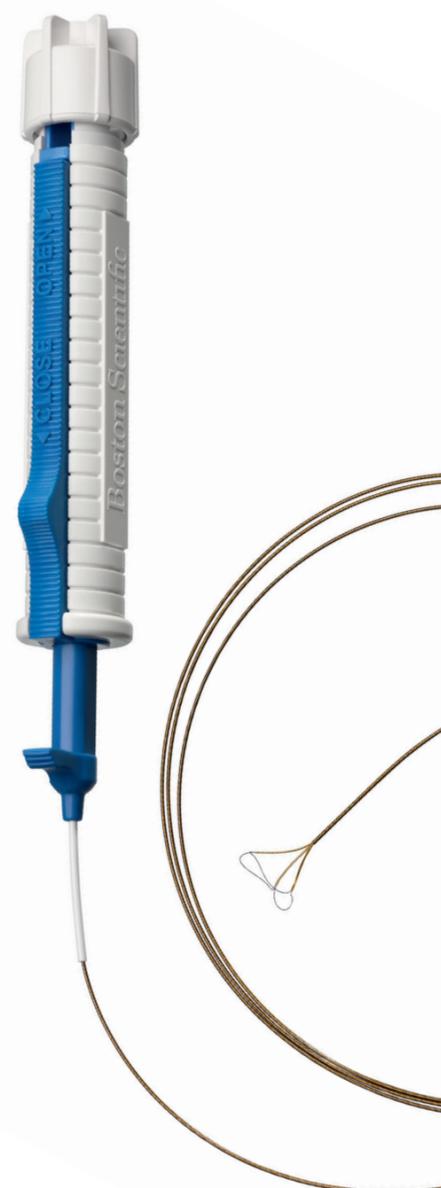

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

www.bostonscientific.eu

© 2016 Boston Scientific Corporation
o sus filiales. Todos los derechos reservados.
DINURO2231SA

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Dakota™

Dispositivo de nitinol para la extracción de cálculos con sistema de liberación OpenSure™

CADA DETALLE CUENTA

Cuando se trata de extraer cálculos complejos de diversos tamaños y composiciones en ubicaciones difíciles,


CADA DETALLE CUENTA.

MAYOR DURACIÓN.

Capture, recolque y extraiga varios cálculos y fragmentos, todo ello en una sola intervención.

Durabilidad de los dispositivos para la extracción de cálculos

El dispositivo de extracción Dakota™ de Boston Scientific frente al extractor de cálculos Competidor A

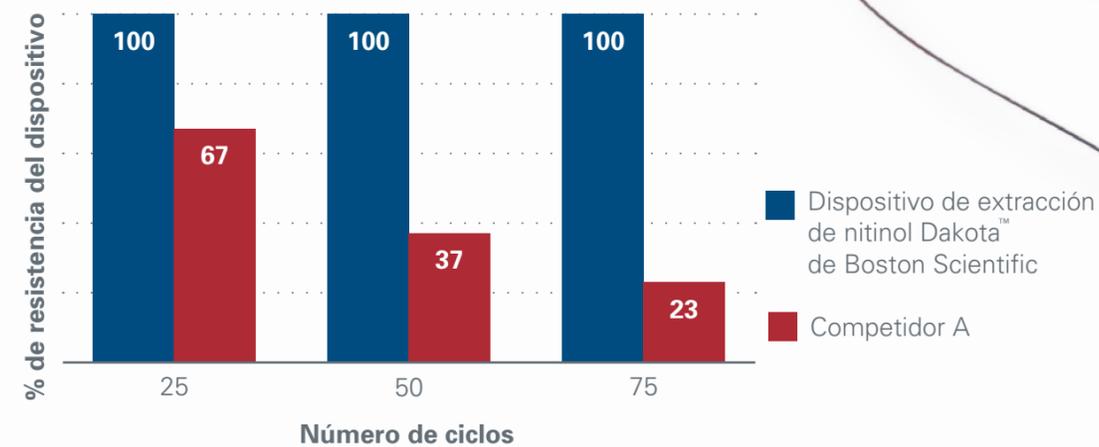

El dispositivo de extracción de nitinol demostró mayor durabilidad que el Competidor A a la hora de extraer los cálculos de mayor tamaño, de entre 8 mm y 10 mm.

Un 100 % de los dispositivos de extracción Dakota resistieron 75 ciclos sin roturas, en comparación con el 23 % de los dispositivos de extracción de Competidor A.*



LIBERAR LO MÁS GRANDE.

Libere con rapidez y según sea necesario los cálculos del riñón más complejos y grandes, con solo presionar una vez el sistema OpenSure™ patentado:

- El dispositivo de 8 mm se abre un 50 % más
- El dispositivo de 11 mm se abre un 39 % más*

LLEGAR A LO MÁS COMPLEJO.

Nuestra cesta flexible de tres brazos se abre y se cierra con una deflexión completa para poder llegar al polo inferior del riñón en pacientes con anatomía tortuosa.

CAPTURAR LO MÁS PEQUEÑO.

El sujetador híbrido de nitinol, de alto rendimiento, permite la captura frontal de cálculos pequeños de 1 mm.

